

Face Lift Panel Kullanımı

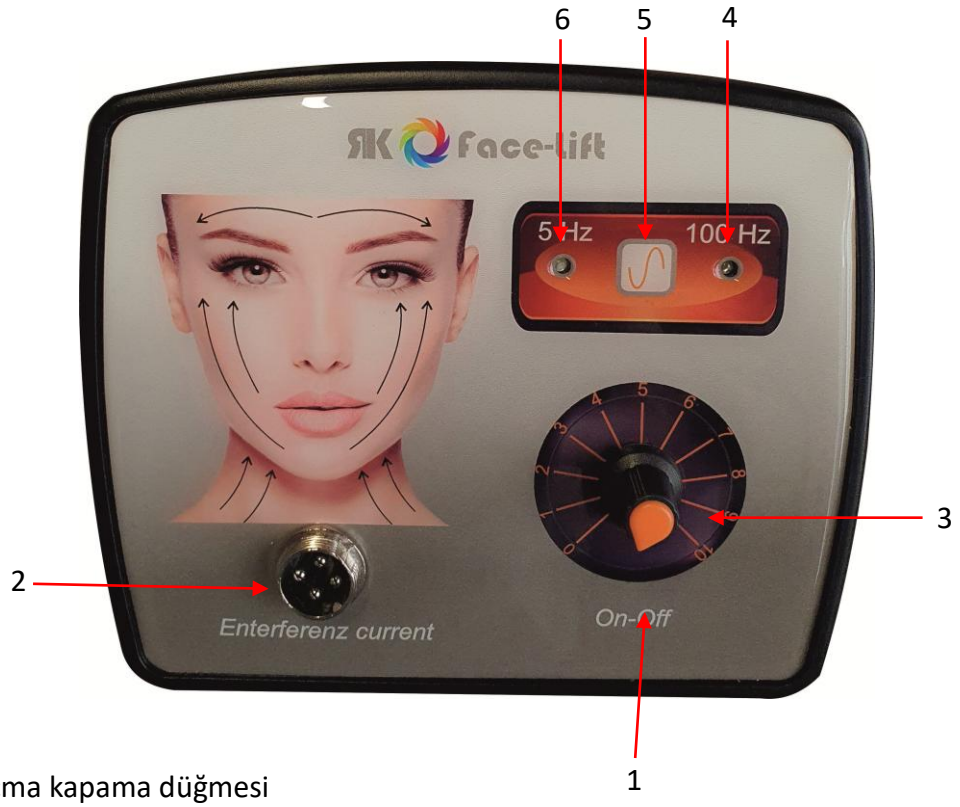

1- Açma kapama düğmesi
2- Yüz lifting prob çıkışı (5Pin)
3- Akım ayar düğmesi.
4- 100 Hz ledi.
5- Frekans seçim butonu.
6- 5 Hz ledi.

İnterferenz akım nedir?

-İntereferenz akımlar iki orta şiddetli akımın girişiminden elde edilir. 4000 Hz frekanslı bir akım ile 3900-4000 Hz frekans aralığında bir akım kullanılır ve bu iki akım doku içinde kesişir. Kesiştikleri noktada aralarındaki farka bağlı 0-100 Hz arasında yeni bir akım oluşur. Esas olarak bu akımının etkileriyle kaslar çalıştırılır. Cildin elektriğe gösterdiği direnç akımın frekansı ile ters orantılıdır.. Cilde uyum ve geçirgenlik için prob uçları altın kaplanmıştır. İnterferenz akım çapraz bağlanılarak uygulanır. Yüz bölgesinde kaz ayaklarının giderilmesine, yüzün gergin görümüne, gıdı sarkmalarında azalmaya yardımcı olur.

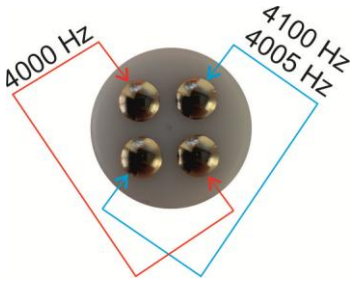

Face Lift Uygulama

Yüz Uygulaması:
1- Cildi temizleme kremiyle temizleyin.
2- İnce tabaka ultrason jeli sürün ve 5 Hz frekansı seçin.
3- Dudak kısmına yakın bir bölgeye probu değdirin ve uygulanan kişi hissedene kadar akımı yükseltin.
4- Şekil B deki gibi yavaş ve yuvarlak hareketlerle uygulamaya başlayın.
5- Yüz bölgesini ikiye bölerek her bölgeye 10 dakika, toplam 20 dakika uygulayın.
6- Çene altı bölgesi uygulanacaksa çene için 5 dakika ekleyin.
7- Dekolte bölgesine 100 Hz frekansı seçin ve Şekil A daki gibi aşağıdan yukarıya doğru yavaş hareketlerle uygulama yapın. İki bölgeye 10 ar dakika uygulama yapın.
7- Haftada 2 veya 3 gün, 6 ila 8 seans uygulayın.

Face Lift Uyarılar.

1- Cihazı açmadan önce Akım ayar düğmesinin sola doğru kapalı olduğundan emin olun.
2- Yüz uygulamasında dolgu veya protez olan bölgede ağrı yapabilir. Akımı düşürerek uygulamayı deneyin.



Şekil B



Şekil A